

Klein und robust !

DAS beste Fingerklemmenpulsoxymeter !

Mit dem Nachfolgermodell des legendären ONYX 9500 sind nun auch Messungen bei Kindern möglich, die neue ergonomische Form sowie die verbesserte Anzeigenoptik erleichtern das Handling nochmals !

keine Verkabelung mehr mit dem Patienten

leicht zu bedienen


wartungsfrei

automatische Aktivierung/ Deaktivierung

geringes Gewicht (nur 53,5g inkl. Batterien)

keine weitere Kalibrierung

2 Jahre Garantie

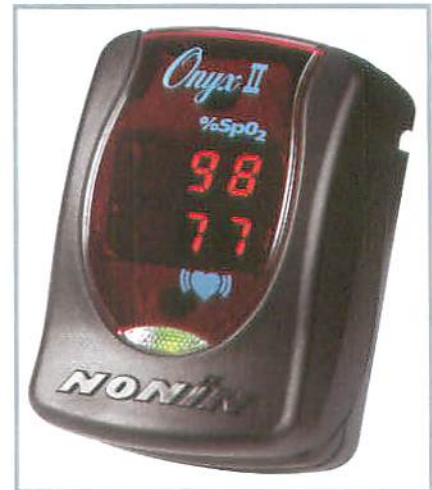

Die gemessenen Werte werden durch gut lesbare LED-Anzeigen dargestellt. Eine blinkende LED zeigt während der Messung die Perfusionsqualität sowie jeden erkannten Pulsschlag an. Das kleine, aber äußerst handliche Gerät wird durch zwei AAA-Batteriezellen betrieben – das ermöglicht **2500 Stichprobenmessungen** (à 45 sec.) oder **21 Stunden Dauerbetrieb**.

Technische Daten:

Bereich der Sauerstoffsättigung:	00 bis 100%
Bereich der Herzfrequenz:	18 bis 321 Pulsschläge pro Minute
Messung:	Rot = 660 Nm / Infrarot = 910 Nm
Genauigkeit:	
a) % SpO2-Genauigkeit:	70 – 100 % ± 2stellig
b) Bereichsgenauigkeit:	± 3% ± 1 Stelle
Temperatur:	
a) Betrieb:	0 bis +40 °C
b) Lagerung:	- 30 bis +50 °C
Abmessungen:	3,32 cm x 3,22 cm X 5,63 cm

Lieferumfang: Nonin Onyx II 9550, Schutztasche, Tragekordel, Bedienungsanleitung, 2 AAA-Batterien

Unser Preis:

Bestell-Nr. RM 8006

379,00 Euro



zzgl. MwSt. und Versand